

QAXRAY Pro Server

Unternehmenslösung zur Qualitätssicherung gemäß DIN 6868-157

Qualitätssicherung für BWS

QAXRAY Pro Server ist die vollständige Intranet-Lösung für die herstellerunabhängige Abnahme- und Konstanzprüfung nach RÖV an Bildwiedergabesystemen (BWS) sowohl gemäß DIN 6868-157 als auch gemäß DIN V 6868-57. Der hausinterne **QAXRAY Pro Server** speichert zentral die Prüfberichte aller BWS. Die intuitive Bedienoberfläche von **QAXRAY Pro** unterstützt optimal die Durchführung von Abnahme- und Konstanzprüfungen: Nach dem Auslesen der Messwerte aus dem Messgerät erfolgt die automatische Berechnung des Prüfungsergebnisses sowie die Generierung der PDF-Prüfberichte. Der Zugriff auf die PDF-Prüfberichte ist jederzeit von überall möglich.



QAXRAY Pro Portable ermöglicht die Prüfung von BWS ohne Softwareinstallation.



QAXRAY Pro im Überblick

- Abnahme- und Konstanzprüfungen an BWS
- Formatfüllende Testbilder für alle Bildschirmauflösungen
- Automatische Übernahme und Auswertung der Messwerte
- Automatische Berechnung des maximalen GSDF Fehlers
- Übernahme der Bezugswerte in die Konstanzprüfung
- Prüfberichte als PDF-Dokument
- Workflow-Unterstützung durch Arbeitslisten
- Export ausgewählter Prüfberichte als .zip Archiv
- Excel™ Export von Verlaufsdaten
- Unterstützte Normen: DIN 6868-157, IEC 62563-1 und DIN V 6868-57 (D, A, CH)


QAXRAY Pro besteht aus den Komponenten **QAXRAY Pro Server** und **QAXRAY Pro Client**. Der Server ist eine Appliance zur Installation in einer virtuellen Umgebung im hausinternen Rechenzentrum, der Client ist eine Windows-Anwendung.

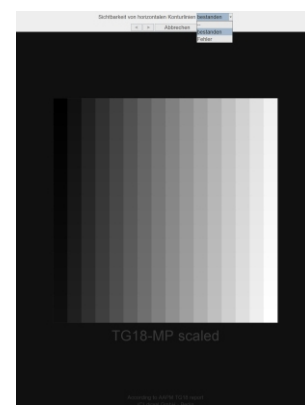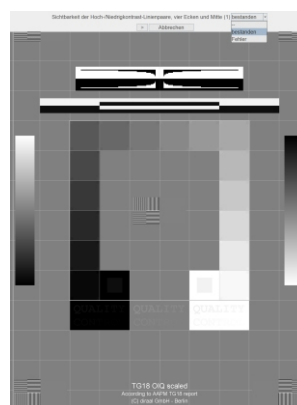

QAXRAY Pro TG-18 Testbilder

QAXRAY Pro Server Vorteile

- Herstellerunabhängige Prüfung aller BWS
- Archivierung auf dem hausinternen **QAXRAY Pro Server**
- Verwaltung aller BWS und Dokumentation aller Prüfungen
- Jederzeit Zugriff auf alle durchgeführten Prüfungen
- Zeit- und Kostenersparnis durch optimierten Workflow
- Automatische Auswertung der Messergebnisse während der Prüfung
- Einzelne Teilprüfungen einer Abnahme- oder Konstanzprüfung sind jederzeit beliebig wiederholbar
- Automatisches Starten der arbeitstäglichen Konstanzprüfung
- Kein Datenverlust bei Neuinstallation der Workstation
- Unterstützung für automatische Softwareverteilung
- **QAXRAY Pro Portable**: Prüfen ohne Softwareinstallation

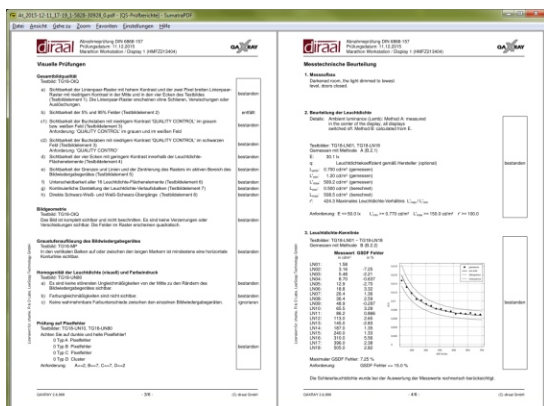

QAXRAY Pro PDF Prüfbericht